

## 安东帕球磨机 BM 500

### 所有设置均一键式操作

仅需操作旋转按钮即可设置进行适当研磨和均匀化所需的所有工艺参数。这种简单直观的设计可迅速完成操作，并能最大限度地减少误差。便于日常工作。可通过三种 LED 状态确定球磨机的工作状态。




### 迅速获得结果 — 数秒内即可均匀混合

BM 500 采用现代化构造以及强力 DC 无刷电机，能迅速获得可重复的结果。根据所用样品材料以及所需的成品细度，可选择 5 秒至 99 分钟的粉磨时间。

### 更好的同步工作

BM 500 可运行同步模式，能以完全相同的方式处理两种单独的子样品。此模式有多种优点，例如可同时研磨大量样品，或留存一批样品作为备用和对照品。

BM 500 可处理的最大容量为 2 x 50 mL。

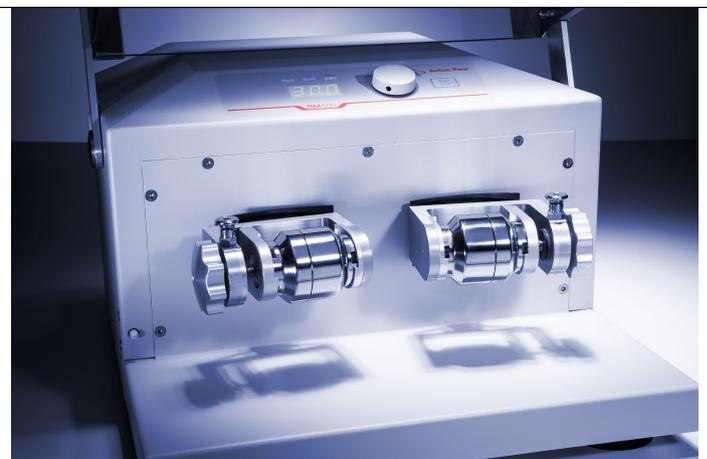

### 获得均匀样品的关键 — 多功能配件

BM 500 的一系列配件可将几乎任何样品材料粉磨至您后续分析所需的细度。尤其在分析粉末本身时，充分均匀化可确保所有成分均能正确检测。此外，对于接触样品的容器罐和研磨球，采用相应的适当材质，可防止样品受到污染，这对微量元素等测量至关重要。



### 一台仪器几乎适用于任何应用

BM 500 是一款万能的粉碎研磨机，因此适合处理从金属、岩石到食品和生物环境材料等各种样品。BM 500 可轻松处理任何形状样品，包括颗粒、小球、纤维以及羊毛、草和树叶等大容量样品。针对弹性材料和敏感样品（如含挥发性成分的样品），可采用低温程序进行完全粉磨或避免某种成分降解或损失。

上海百贺仪器科技有限公司  
SHANGHAI BAHENS INSTRUMENTS CO., LTD.  
规格外观如有变更，恕不另行通知



Tel.: 021-3358 7030 Fax.: 021-3358 9826  
Service call: 400-099-6011  
Http://www.bahens.com